



**ELEKTRICKÁ SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA 360°**

Návod na použitie

## BATÉRIE

### 1. Informácie o batérii

Tento produkt funguje za použitia lítiové batérie odolné proti výbuchu.

- 1) Batéria je balená v mäkkom polymérový obale, odolnom proti výbuchu, bez rizika úniku, neobsahuje žiadne ťažké kovy.
- 2) Batéria má vysokú hustotu energie, väčší než je u tradičnej lítiové batérie.
- 3) Funguje pri teplote v rozmedzí od -10°C do 60°C.

### 2. Ochrana životného prostredia

- 1) Lítiovú batériu v žiadnom prípade nerozoberajte. Na batériu sa nevzťahuje záruka.
- 2) Batériu nelikvidujte spolu s bežným domácim odpadom, ale vyhodte ju do triedeného odpadu.

## Poznámka

1. Štandardná pracovná teplota výrobku je v rozmedzí od 0°C do 50°C.
2. Kvôli svojim vlastnostiam výrobok nabíjajte pri bežnej izbovej teplote.
3. Venujte pozornosť bezpečnosti - v prípade, že produkt dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete.
4. Uchovávajte výrobok na suchom a chladnom mieste, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

## LED svetelná kontrolka:

- Počas nabíjania LED bliká kontrolka. Po úplnom nabití LED kontrolka zhasne.
- Pokiaľ LED kontrolka začne blikáť, je potrebná kefku nabiť.

## Ovládacie tlačidlo:

- Krátkym stlačením tlačidla kefku zapnete a ďalšími stlačeniami vyberiete vhodný režim pre svoje dieťa (1-3 stlačení).
- Štvrtým stlačením tlačidla kefku vypnete.
- Zvolený režim trvá 2 minúty.
- Režim I je vhodný pre deti vo veku 2-4 roky, režim II 4-6 rokov, režim III 5-8 rokov

## Nabíjanie:

- Doba výdrže nabitie prístroja závisí od používaného režimu:
- režim I - 22 dní
- režim II - 18 dní
- režim III - 14 dní
- Platí za predpokladu, že je kefka plne nabitá a čistenie zubov prebieha 3x denne.
- Vyššie uvedené dáta sú skutočným výsledkom laboratórnych testov.

## Vlastnosti

- **Antibakteriálny materiál chrániaci životné prostredie s protišmykovou úpravou**

Pohodlné, dlhodobé, čisté.

- **Silikónový antibakteriálny materiál vhodný pre styk s potravinami**

360° kontakt s ďasnami a zúbky.

- **Chráni proti atrofii ďasien**

Podporuje krvný obeh a znižuje riziko ochorenia ďasien.

- **Bezdrôtové nabíjanie**

Jedno nabíjania, dlhá životnosť batérie, úspora energie a ochrana životného prostredia.

- **Dotykové tlačidlo**

Jediným kliknutím spustíte proces čistenia zúbkov.

- **Trojstranná kefka 360°**

Zaistí kompletne vyčistenie zúbkov.

- **Inovatívny spôsob držania**


Uľahčuje čistenie.

- **Hlava kefky je dokonale spojená s rukoväťou**

Dokonale vyčistí všetky zúbky.

## Funkcie výrobku

### 1. Časti výrobku

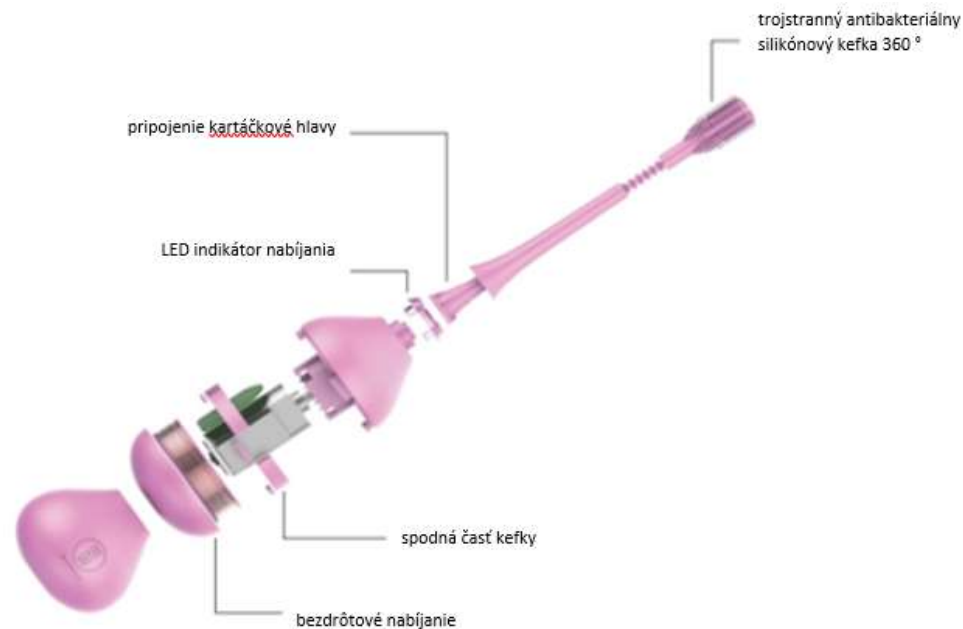

## 2. Nabíjanie výrobku

Umiestnite kefku na nabíjaciu základňu, ktorá je pomocou USB pripojená k elektrickej sieti (5V/500mA), potom sa kefka začne nabíjať.

### Nabíjanie

Bezdrôtová metóda nabíjanie s najväčším zmyslom pre vedu a technológiu v dnešnej modernej dobe.

bezdrôtové nabíjanie



Jednoduchým stlačením jediného tlačidla v spodnej časti môžete zažiť nadštandardné spôsob čistenia zubkov. Veľmi jednoduchá obsluha bez zbytočných ovládacích Tlačidiel.

dotykové tlačidlo

### Použitie

#### 1.krok

Najskôr nasadte čistiacu hlavicu na elektrickú základňu ťahom dole. Ak je potrebné vymeniť hlavu kefky, vytiahnite ju v opačnom smere a nahraďte ju novou.



#### 2.krok

Po nasadení čistiace hlavice vytlačte zubnú pastu medzi štetinky, aby nedošlo k jej nechcenému spadnutiu.

#### 3.krok

Po stlačení tlačidla v spodnej časti začne zubná kefka fungovať. Stlačením zvolíte 1 zo 3 režimov. Počas prevádzky držte kefku za spodnú časť. Opätovným stlačením kefku vypnete.



#### 4. krok

Po použití umiestnite elektrickú zubnú kefku na nabíjaciu základňu. Zakryte ho priehľadným krytom, aby počas nabíjania nedošlo k znečisteniu čistiace hlavice.



#### Parametre výrobku

rozmery: 66 x 66 x 160mm  
doba nabíjania: 3 hodiny  
hmotnosť: 175g  
350mAh