



KilöPro

Vývojová stupnica

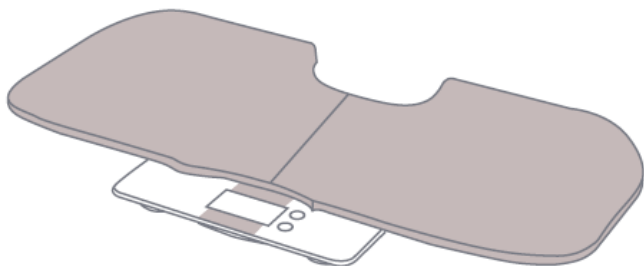

Pred použitím si pozorne prečítajte návod.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk

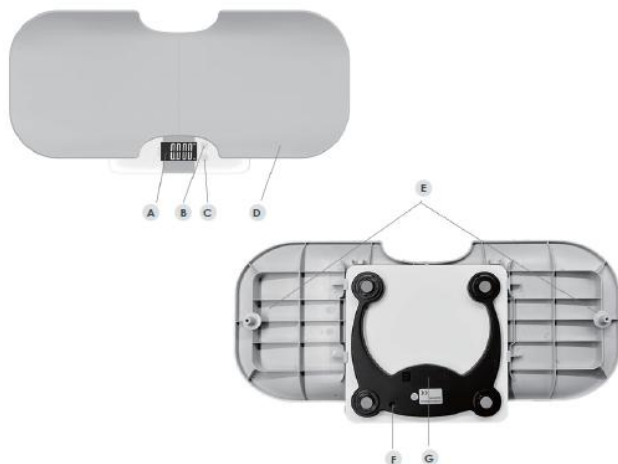

A LCD displej

B Napájanie – tlačidlo Tare

C Orientácia LCD displeja – tlačidlo Hold

D Zásobník

E Držiaky zásobníka

F Tlačidlo výberu hmotnosti

G Priestor pre batérie

NASTAVENIA

AKO VLOŽIŤ BATÉRIE?

Odskrutkujte kryt batériového priestoru pod váhou otočením skrutky proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite kryt za jazyček. Vložte dve batérie typu „AAA“ podľa značiek polarita vo vnútri priestoru. Nasadte späť kryt priestoru pre batérie. Keď sa na LCD displeji zobrazí „Lo“,

batérie je potrebné vymeniť.

AKO NAMONTOVAŤ PODNOS?

1. Vyberte držiaky podnosu so skrutkami z plastového vrečka vedľa podnosu.
2. Pripevnite držiak podnos k zadnej strane zásobníka pomocou skrutky.
3. Zložte zásobník.
4. Posuňte podnos na váhu tak, že zarovnáte drážky na spodnej strane podnosu so stranami váhy, a pritlačte podnos na váhu, kým výstupky na spodnej strane podnosu nedosiahnu spodný okraj váhy.



KDE UMÍSTIŤ VÁHU?

Váhu umiestnite na rovný, stabilný povrch, aby ste zaistili presné meranie.

POUŽÍVANIE

1. Stlačte tlačidlo napájania/Tare (B) na aktiváciu váhy. Akonáhle sa na LCD displeji zobrazí nula, váha je pripravená na použitie.
2. Pri zapnutých váhach stlačte tlačidlo výberu jednotiek (F) umiestnené pod váhami vedľa priestoru pre batérie, aby ste vybrali „kg“ (kilogramy), „lb“ (libry), „oz“ (unci) alebo „lb:oz“ (libry a unce).

POZNÁMKA: Predvolené nastavenie je „kg“ (kilogramy). Váha si zapamätá váš posledný výber, kým nevymeníte batérie.

3. Krátko stlačte tlačidlo LCD/Hold (C), aby ste nastavili požadovanú orientáciu displeja.
4. Opatrne položte dieťa na podnos, pričom venujte osobitnú pozornosť jeho hlave. Ak nechcete dieťa položiť priamo na vážiacu plochu a uprednostňujete použitie uteráka alebo deky, najskôr položte uterák/deku na váhu. Váha je vybavená automatickou funkciou TARE pre váhy v rozsahu od 0 do 500 gramov. Upozorňujeme, že hmotnosť zostane viditeľná po dobu 5 sekúnd, potom sa vynuluje. Ak na váhu položíte niečo s hmotnosťou nad 500 gramov, krátko stlačte tlačidlo napájania/Tare (B), aby ste manuálne aktivovali funkciu TARE. Na LCD displeji sa na krátko zobrazí „-----“ a váha sa vynuluje.

5. Táto váha má automatickú aj manuálnu funkciu HOLD. Funkcia Auto Hold zobrazí hmotnosť, akonáhle sa dostatočne stabilizuje, aby bolo možné určiť presnú hodnotu, a zostane zobrazená približne 30 sekúnd.

POZNÁMKA: Ak sa dieťa príliš hýbe, funkcia Auto Hold sa neaktivuje. V takomto prípade stlačte tlačidlo LCD/Hold (C), keď je dieťa čo najviac v pokoji. Do troch sekúnd prestanú čísla blikať a zobrazí sa hmotnosť.

6. Na vypnutie váhy stlačte a podržte tlačidlo napájania/Tare (B). Váha sa tiež automaticky vypne po približne 30 sekundách.

VÁŽENIE STOJACEJ OSOBY

1. Odstráňte podnos z váhy (ak je pripojený).

2. Krátko stlačte tlačidlo napájania/Tare (B) na aktiváciu váhy.

3. Krátko stlačte tlačidlo LCD/Hold (C) na otočenie LCD displeja tak, aby bol čitateľný, keď stojíte na váhe, s LCD displejom smerujúcim dopredu.

POZNÁMKA: Tlačidlo napájania/Tare (B) nebude fungovať, ak sa váha používa týmto spôsobom, aby sa zabránilo náhodnej aktivácii váhy nohou používateľa, keď stojí na tlačidle LCD/Hold (C).

4. Keď váha ukazuje nulu, stojte na váhe s nohami od seba, kým sa váha nestabilizuje a nezobrazí sa LCD displej.

5. Váha sa automaticky vypne po približne 30 sekundách.

CHYBY A RIEŠENIA

EEEEEE

Príčina: Prekročenie kapacity 180 kg (396 lb)

Riešenie: Neprekračujte maximálnu hmotnosť

Lo

Príčina: Slabé batérie

Riešenie: Vymeňte batérie

Žiadny displej

Príčina: Batérie sú vybitá alebo nesprávne vložené

Riešenie: Vymeňte batérie a skontrolujte správnu polaritu

Váha zobrazuje nereálny výsledok

Príčina: Váha je umiestnená na mäkkom povrchu alebo došlo k pohybu počas merania

Riešenie:

Umiestniť váhu na tvrdý povrch (nie na koberci)

Počas merania stojte nehybne

Počkajte, kým sa váha automaticky vypne, a zmeranie zopakujte

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ batérie: 2× AAA

Rozsah merania: 0,5 kg až 180 kg (1,1 lb až 396 lb)

Rozlíšenie:

5 g (0,01 lb) kroky (0–20 kg / 0–44 lb)

50 g (0,1 lb) kroky (20–180 kg / 44–396 lb)

Teplotný rozsah:

Prevádzka: 5 °C až 40 °C (41 °F až 95 °F), relatívna vlhkosť 20–85 %

Skladovanie: -20 °C až 60 °C (46 °F až 140 °F), relatívna vlhkosť 20–90 %