


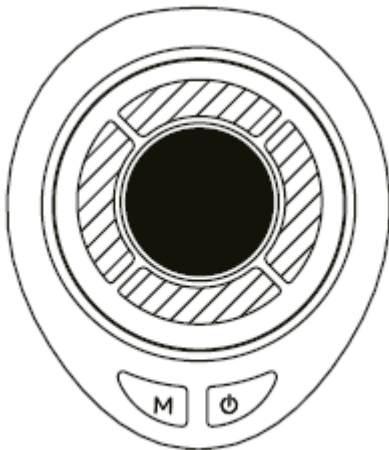

GIOperfect čistiaca kefka s EMS
GIO-711

NÁVOD NA POUŽITIE
Sónické LED zariadenie na
starostlivosť o pleť s EMS
terapiou

Aby ste predišli zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním, pozorne si prečítajte pokyny a používajte tento výrobok výhradne v súlade s pokynmi.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.sk

INFORMÁCIE O PRODUKTE

1. Princíp sonických vibrácií

Toto zariadenie využíva technológiu mikrovibrácií a svetelnej terapie v kombinácii s inteligentným dizajnom, ktorý sa prispôsobuje kontúram tváre a umožňuje hlboké čistenie pleti bez vynechania akýchkoľvek oblastí.

Vysiela približne **8 000 vysokofrekvenčných vibrácií za minútu**, ktoré uvoľňujú hlboko usadený kožný maz a nečistoty z pórov. Po použití je pokožka čistá, jemná, hladká a pružná, čo predstavuje novú úroveň účinného čistenia pokožky.

2. Princíp tepelnej starostlivosti

Jemné zahrievanie stimuluje krvný obeh v hlbších vrstvách pokožky a urýchľuje jej metabolizmus. Táto funkcia účinne redukuje tmavé kruhy a jemné vrásky okolo očí a zlepšuje priehľadnosť a jas pokožky aj bez make-upu.

V kombinácii s mikrovibráciami pomáha ohrievanie zlepšiť pevnosť pokožky a zmierniť únavu.

A. Účinky mikrovibrácií

- Zvyšuje pevnosť a pružnosť pokožky
- Pomáha predchádzať alergiám a kožným problémom
- Stiahne póry, uzamkne vlhkosť a redukuje vrásky
- Uvoľňuje svalové napätie, únavu pokožky, začervenanie a opuchy
- Pomáha predchádzať opätovnému výskytu akné

B. Otepľujúci účinok

- Upokojuje pokožku a svaly, zmierňuje bolesť a napätie
- Stimuluje krvný obeh, otvára póry a zlepšuje vstrebávanie kozmetických prípravkov
- Zlepšuje pružnosť a hydratáciu pokožky
- Pri použití s bavlneným tampónom umožňuje hlboké čistenie a účinnejšie odstránenie kožného mazu a nečistôt

3. Princíp svetelnej terapie

Červené svetlo

Podporuje bunkovú aktivitu a metabolizmus, stimuluje produkciu kolagénu, zlepšuje krvný obeh a pružnosť pokožky. Redukuje matnosť a žltý odtieň pokožky, má protivráskové a regeneračné účinky.

Modré svetlo

Účinne redukuje zápal pri tvorbe akné. Potláča baktérie spôsobujúce akné bez poškodenia okolitého tkaniva a skracuje zápalovú fázu.

Žlté svetlo

Preniká do hlbších vrstiev pokožky, je absorbované červenými krvinkami a podporuje fotochemické reakcie. Pomáha rozkladať pigmentáciu, podporuje lymfatický odtok a zlepšuje drsnosť, začervenanie a celkovú imunitu pokožky.

Fialové svetlo

Má antibakteriálne a protizápalové účinky, podporuje produkciu kolagénu, zlepšuje pružnosť a jas pokožky a pomáha redukovať príznaky starnutia a podráždenia.

4. Účinok jadeitovej terapie


Jadeit je považovaný za kameň s prirodzenými dezinfekčnými, detoxikačnými a upokojujúcimi vlastnosťami. Podporuje krvný obeh, spomaľuje starnutie, zlepšuje kvalitu spánku a posilňuje metabolizmus a imunitu. Pomáha potláčať široké spektrum baktérií a vírusov bez vedľajších účinkov.

5. Technológia EMS mikroprúdu

Zariadenie využíva technológiu EMS (elektrická stimulácia svalov), ktorá aktivuje kožné bunky, stimuluje produkciu kolagénu a svalové kontrakcie. Počas používania môžete pocítiť jemné brnenie a pocit napnutia. EMS pomáha redukovať jemné vrásky a linky a obnovuje hladký, pevný a mladistvý vzhľad pokožky – bezpečne a bezbolestne.


Nabíjací port

Ochranný kryt

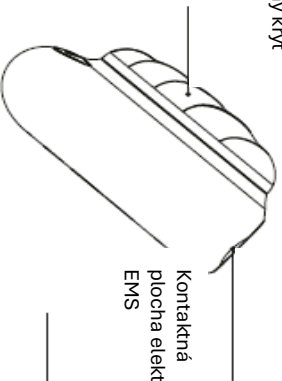

Kontaktná
plocha elektródy
EMS


Tlačidlo režimu

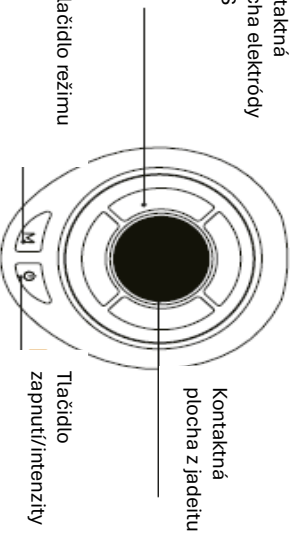

Kontaktná
plocha z jaderitu

Tlačidlo
zapnutí/intenzity

Krúžok na pripavenie
vatovej tyčinky

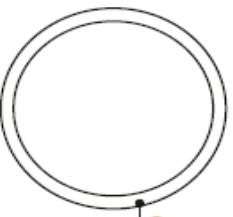

UPOZORNENIE

1. Pred čistením vždy vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť.
2. Na čistenie hlavy a povrchu zariadenia používajte nealkoholové utierky alebo mäkkú handričku.
3. Nepoužívajte oceľovú vlnu ani agresívne čistiace prostriedky.
4. Zariadenie udržiavajte v suchu. Neponárajte ho do vody ani ho nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vlhkosti, pretože by mohlo dôjsť ku skratu alebo poškodeniu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Neodporúča sa používať:
 - osobám s implantovanými elektronickými zdravotníckymi zariadeniami (napr. kardiostimulátormi)
 - osobám s prístrojmi na udržanie života (napr. umelými srdcovo-pľúcnymi strojmi)
 - osobám s akútnymi alebo infekčnými ochoreniami (napr. tuberkulózou)
 - osoby s vysokým krvným tlakom alebo poruchami krvi
 - osoby s kožnými ochoreniami, ekzémom, alergiami
 - osoby so zníženou citlivosťou na teplo alebo bolesť
 - osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami

2. Nepoužívajte na:

- miestach s implantátmi alebo kovom pod kožou
- zapálenej, začervenej alebo podráždenej koži
- vyvýšených alebo nepravidelných materských znamienkach, viečkach a oblasti okolo očí

3. Ak pocítite bolesť alebo nezvyčajné pocity, okamžite prestaňte zariadenie používať.

4. Po každom použití zariadenie vyčistite, aby sa na ňom nehromadil prach alebo vlhkosť, čo by mohlo skrátiť jeho životnosť.

5. Ak sa zariadenie nadmerne zahreje, okamžite ho vypnite.

6. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Produkt neskladujte ani nepoužívajte v kúpeľniach alebo iných vlhkých prostrediach.

7. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom používať alebo vkladať kovovú špičku do úst, pretože by to mohlo viesť k poraneniu.

8. Neupúšťajte a nerozoberajte zariadenie. Ak je poškodené v dôsledku nárazu, nepoužívajte ho ďalej.

9. Neponárajte do vody ani neoplachujte pod tečúcou vodou po dlhšiu dobu.

10. Citlivá pokožka – používajte maximálne raz týždenne.

11. Nenabíjajte s mokrými rukami. Vždy nabíjajte v suchom prostredí a pred nabíjaním sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

12. Ak zariadenie nepoužívate dlhšie ako 7 dní, odpojte ho od nabíjačky. Nečakajte, kým sa batéria

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, aby sa zariadenie zaplo; ozvú sa dva pípnutia. Stlačte a podržte tlačidlo opäť po dobu 2 sekúnd, aby sa zariadenie vyplo; tentoraz sa ozve dlhé pípnutie.
2. Intenzita vibrácií je štandardne nastavená na nízku úroveň. Stlačením tlačidla úrovne nastavte úroveň v nasledujúcom poradí: nízka – stredná – vysoká. Každé stlačenie tlačidla je sprevádzané krátkym pípnutím. Dvojitém stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete vibrácie.
3. V režime rozjasňovania a omladzovania, ktorý sa automaticky aktivuje po zapnutí napájania, sa aktivujú funkcie červeného svetla, indukčných vibrácií a ohrevu.
4. Ak chcete aktivovať režim spevňovania, ťuknite na tlačidlo režimu, aby sa aktivovali funkcie modrého svetla, mikroprúdu a indukčných vibrácií.
5. Ak chcete aktivovať režim hydratácie a regenerácie, opäť stlačte tlačidlo režimu, aby ste prešli do režimu žltého svetla, ktorý aktivuje indukčné vibrácie a funkcie ohrevu.
6. Ak chcete aktivovať režim upokojenia, stlačte tlačidlo režimu ešte raz, čím sa aktivujú funkcie fialového svetla, indukčných vibrácií, mikroprúdu a ohrevu.
7. Predvolené svetlo bude blikať, aby signalizovalo nízky stav batérie. Modré svetlo bude blikať počas sonických vibrácií. Zariadenie vydá šesť pípnutí a potom sa automaticky vypne.
8. Inteligentný 8-minútový časovač automaticky vypne zariadenie po jednej relácii.

Ako pripojiť vatovú tyčinku



Ako používať

Očistite a osušte tvár a odstráňte všetky stopy make-upu.

Odstráňte všetky kovové šperky z tváre, krku a rúk.

V závislosti od potrieb vašej pokožky naneste tenkú vrstvu vodivého gélu alebo primerané množstvo vášho obľúbeného produktu na starostlivosť o pleť. Vyberte vhodný režim a úroveň intenzity.

Pred prvým použitím vykonajte test citlivosti.

Zapnite zariadenie, vyberte režim a intenzitu.

Jemne masírujte pokožku pomalými pohybmi smerom nahor.

Po použití vypnite zariadenie a hlavicu očistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nezabudnite očistiť okraje a štrbiny, aby sa v nich nehromadili nečistoty.

Opláchnite si tvár a naneste svoje obvyklé produkty na starostlivosť o pleť.

NABÍJANIE

Blikajúce modré svetlo = nabíjanie

Stále svietiace svetlá + 3 pípnutia = úplne nabité

Počas nabíjania zariadenie nezapínajte.

UPOZORNENIE

Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu akýchkoľvek ochorení. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.