




Minicäre

Set na starostlivosť



Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00
Praha
www.andys.sk

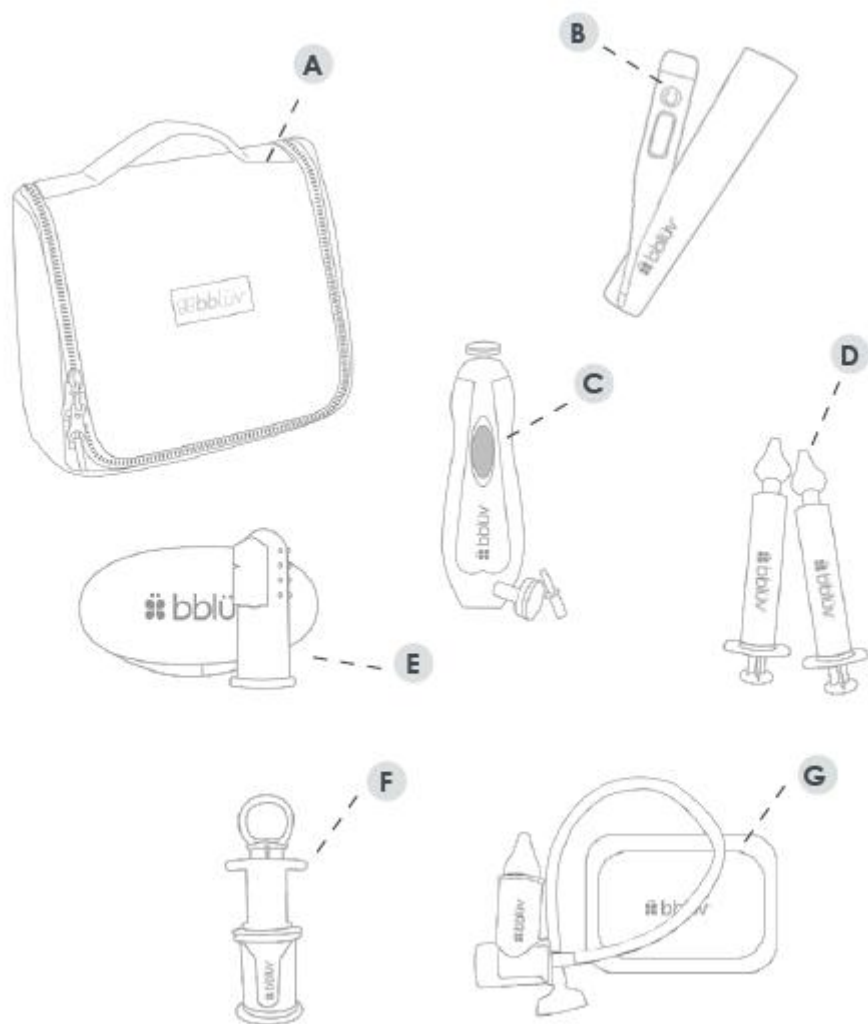

Obsah sady

- A. Textilné puzdro
- B. Digitálny teplomer
- C. Elektrická pilka na nechty
- D. Striekačky na výplach nosa (2 ks)
- E. Prstová zubná kefka
- F. Cumlík na podávanie liekov
- G. Ručný odsávač z nosa

Zubná kefka na prst

Návod na použitie

1. Pred každým použitím si umyte ruky.
2. Nasadte kefku na čistý prst.
3. Naneste malé množstvo vody alebo detskej zubnej pasty (voliteľné).
4. Jemnými kruhovými pohybmi čistíte detské ďasná, prerastajúce zuby aj jazyk.
5. V prípade potreby dieťaťa vypláchnite ústa.

Čistenie

- Po každom použití kefku dôkladne umyte teplou vodou a mydlom.
- Možno sterilizovať vyvarením alebo v sterilizátore.
- Pred uložením nechajte kefku úplne vyschnúť na vzduchu.

Upozornenie

- Pri čistení zubov majte dieťa vždy pod dohľadom, aby nedošlo k úrazu.
- Nenechajte dieťa hrýzť kefku ani si s ňou hrať bez dozoru.
- Dávajte pozor na riziko zadusenía – kefka musí pevne sedieť na prste a nesmie mať voľné časti.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodená. Ak je opotrebovaná, natrhnutá alebo sa uvoľňujú štetiny, vymeňte ju.
- Po každom použití ju dôkladne očistite teplou mydlovou vodou alebo podľa pokynov výrobcu.
- Používajte iba detskú zubnú pastu bez fluóru a iba v množstve zodpovedajúcom veľkosti zrnka ryže.
- Nezasúvajte kefku hlboko do úst dieťaťa, aby nedošlo k dávivému reflexu.
- Skladujte na čistom a suchom mieste, aby sa zabránilo rastu baktérií a plesní.
- Vyberte kefku vhodnú pre vek dieťaťa – mäkkú, z potravinárskeho silikónu, bez BPA.
- Nedovoľte dieťaťu, aby kefku hryzalo, najmä počas prerezávania zubov, pretože by sa mohla roztrhnúť.
- Kefku pravidelne vymieňajte, zvyčajne každé 1–3 mesiace alebo skôr, ak je poškodená.

Striekačka na výplach nosa

Návod na použitie


1. Naplňte striekačku sterilným fyziologickým roztokom.
2. Položte dieťa na bok s mierne naklonenou hlavou.
3. Jemne vložte mäkkú špičku do hornej nosnej dierky.
4. Pomaly stlačte piest a aplikujte roztok (1 až 5 ml podľa veku dieťaťa).
5. Nechajte roztok vytekať spodnou nosnou dierou alebo ústami.
6. Utrite okolie nosa a podľa potreby postup zopakujte na druhej strane.

Čistenie

- Po každom použití dôkladne umyte teplou vodou s čistiacim prostriedkom.
- Dôkladne opláchnite a nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.
- Možno sterilizovať varením.

Upozornenie

- Používajte iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pred použitím u dojčiat alebo detí s chronickými nosnými ťažkosťami, zápalmi uší alebo inými zdravotnými problémami sa vždy poraďte s lekárom.
- Používajte iba sterilnú alebo destilovanú vodu alebo fyziologický roztok. Voda z vodovodu môže obsahovať škodlivé mikroorganizmy.
- Pred každým použitím sa uistite, že striekačka je čistá a dezinfikovaná, aby sa predišlo infekcii.
- Používajte iba jemný tlak – roztok nikdy nevtláčajte do nosa silou. Nadmerný tlak môže spôsobiť zápal uší alebo poškodiť nosnú sliznicu.
- Ak je dieťa nepokojné, nepokračujte násilím.
- Nezasúvajte špičku príliš hlboko do nosnej dierky.
- Správna poloha dieťaťa je veľmi dôležitá – hlava by mala byť mierne naklonená dopredu, aby roztok mohol voľne odtekať a nedostal sa do uší.
- Skontrolujte teplotu roztoku – mal by byť vlažný, nie horúci ani studený.
- Nepoužívajte tú istú nosnú striekačku pre viac osôb, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii.
- Nepoužívajte ju, ak má dieťa silne upchatý nos alebo sa výrazne bráni, pretože by mohlo dôjsť k nepohodliu alebo poraneniu.
- Dieťa počas výplachu nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Striekačku pravidelne vymieňajte, najmä ak je opotrebovaná, zakalená alebo ju nie je možné dôkladne vyčistiť.

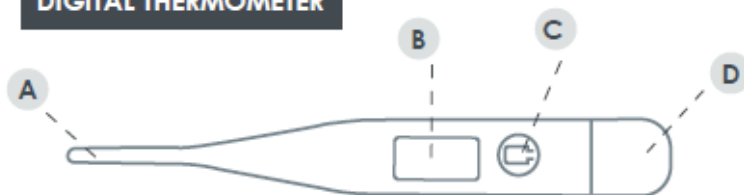

Digitálny teplomer

Popis častí

- A. Meracia špička
- B. Displej
- C. Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie
- D. Kryt batérie

Návod na použitie

1. Pred každým použitím dezinfikujte meraciu špičku alkoholom.
2. Stlačte tlačidlo **ON/OFF**. Ozve sa pípnutie a na displeji sa na 2 sekundy zobrazí posledná nameraná teplota.
3. Teplomer vykoná automatickú kontrolu a zobrazí hodnotu **98,6 °F/ 37,0 °C**.
4. Akonáhle sa zobrazí nápis „Lo“ a začne blikať symbol **°F** alebo **°C**, prístroj je pripravený na meranie.
5. Umiestnite merací hrot do požadovanej polohy (do úst, do podpazušia alebo do konečníka).
6. Akonáhle symbol **°F** alebo **°C** prestane blikať (približne po 60 sekundách), meranie je ukončené a teplota je stabilná.
7. Ak teplota ešte pred vypnutím ďalej stúpa, teplomer automaticky začne nové meranie bez blikania alebo zvukového signálu.
8. Prístroj sa automaticky vypne približne po 10 minútach. Aby ste šetrili batériu, po použití ho vypnite ručne. Ak displej slabne alebo teplomer prestane správne reagovať, vymeňte batériu.

Funkcie

- **Teplotný alarm** – po dokončení merania a pri nameraní hodnoty v bežnom rozsahu zaznie rýchle pípnutie (10 pípnutí, krátka pauza a opakovanie).
- **Pamäť** – po zapnutí sa na 2 sekundy zobrazí posledná nameraná teplota.
- **Prepínanie °C/°F** – po zapnutí podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 2 sekúnd.

Poznámky

- Pred každým použitím teplomer vždy dezinfikujte.
- Ak je nameraná teplota nižšia ako **32,0 °C (89,6 °F)**, zobrazí sa **Lo**.
- Ak je vyššia ako **42,9 °C (109,2 °F)**, zobrazí sa **Hi**.
- Ak je displej slabý alebo teplomer nereaguje správne, vymeňte batériu.

Spôľahlivé spôsoby merania teploty

Meranie v ústach

- Vložte merací hrot hlboko pod jazyk a zavrite ústa.
- Bežná telesná teplota je **36,0 °C až 37,5 °C**.

Meranie v konečníku

- Použite ochranný návlek na meracie hrot a kĺzavý gél na vodnej báze (nie vazelínu).
- Jemne zasuňte hrot maximálne **1–1,5 cm**. Nikdy nepoužívajte silu.
- Teplota meraná v konečníku je zvyčajne o **0,5 až 1,0 °C vyššia** ako teplota meraná v ústach.

Meranie v podpazuší

- Pred meraním osušte podpazušie.
- Priložte merací hrot a pevne pritlačte ruku k telu.
- Teplota meraná v podpazuší je zvyčajne o **0,5 až 1,0 °C nižšia** ako teplota meraná v ústach.
- Odporúčaná doba merania je **3–5 minút**, aj keď teplomer zapípa skôr.

Poznámky

- Deti musia byť počas celého merania pod dohľadom dospeléj osoby.
- Teplomer uchováajte mimo dosahu detí.
- Pri porovnávaní dvoch teplomerov sú malé rozdiely v meraniach (**±0,1 °C / ±0,2 °F**) bežné vzhľadom na výrobné tolerancie a odlišné metódy merania.

Čistenie

Na čistenie teplomeru umyte merací hrot jemným čistiacim prostriedkom a studenou vodou.

Na dezinfekciu utrite snímač handričkou navlhčenou bežným domácim dezinfekčným prostriedkom, napríklad lekársnym liehom.

Výmena batérie

1. Akonáhle sa zobrazí symbol batérie, je potrebné batériu vymeniť.
2. Odstráňte kryt batérie podľa obrázku.
3. Jednou rukou pridržte mechanizmus a druhou pomocou špáradla odstráňte horný kryt.
4. Opatrne vysuňte plastovú dosku s priestorom pre batériu približne o 1 cm.
5. Pomocou špicatého predmetu (napríklad pera) vyberte starú batériu. Vložte novú batériu a kryt bezpečne uzavrite.



Upozornenie

- Teplomer používajte vždy pod dohľadom dospelšej osoby. Nikdy nedovoľte dojsť ani malým deťom, aby s teplomerom manipulovali samostatne.
- Pred každým použitím aj po ňom teplomer dôkladne vyčistite liehom alebo vodou s čistiacim prostriedkom podľa pokynov výrobcu.
- Ak je k dispozícii ochranný náväk na meráciu špičky, používajte ho najmä pri rektálnom alebo orálnom meraní.
- Pri rektálnom meraní postupujte veľmi opatrne. Špičku zavádzajte len **1,25–2,5 cm** a pri akomkoľvek odporu okamžite prestaňte.
- Nepoužívajte prasknutý, poškodený alebo nefunkčný teplomer.
- Uchovávajte ho mimo dosahu detí, najmä ak obsahuje malé batérie, ktoré predstavujú riziko zadusenia.
- Batérie vymieňajte podľa potreby. Slabá batéria môže spôsobiť nepresné merania. Staré batérie nenechávajte vo vnútri prístroja, pretože môžu vytekať.
- Použitú batériu bezpečne zlikvidujte mimo dosahu detí. Jej prehltutie môže byť smrteľné. Ak dôjde k prehltutiu, okamžite kontaktujte nemocnicu. Batériu nikdy nehádzte do ohňa, pretože môže explodovať.
- Pri likvidácii batérií dodržiavajte miestne predpisy.
- Ak nie je možné bezpečne uzavrieť kryt batérie, výrobok ďalej nepoužívajte a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Batériu násilne nevybíjajte, nenabíjajte ju, nerozoberajte, nezahrievajte nad **50 °C** ani ju nehádzte do ohňa. Mohlo by dôjsť k úniku chemických látok, výbuchu alebo chemickému popáleniu.

Upozornenie týkajúce sa batérií

Ak došlo k prehltnutiu batérie alebo existuje podozrenie, že bola prehltnutá, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a informujte zdravotnícky personál o podozrení na prehltnutie batérie.

Nie je vždy ľahké zistiť, že dieťa prehltlo gombíkovú batériu, pretože sa nemusia objaviť žiadne typické príznaky. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky:

- kašeľ, dávivý reflex alebo nadmerné slinenie,
- príznaky pripomínajúce žalúdočné alebo vírusové ochorenie,
- vracanie,
- bolesť žalúdka, hrudníka alebo krku,
- únava alebo nezvyčajne malátne správanie,
- strata chuti do jedla.

Keďže tieto príznaky nie sú jednoznačné, je dôležité starostlivo sledovať všetky voľne uložené, použité aj náhradné gombíkové batérie v domácnosti, ako aj výrobky, ktoré ich obsahujú.

- Použité batérie ihneď vyberte a odovzdajte na recykláciu alebo ekologickú likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte ich mimo dosahu detí. **Batérie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu ani do ohňa.**
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.
- Informácie o prvej pomoci získate v miestnom toxikologickom informačnom centre.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Pri vkladaní batérií vždy dodržiavajte správnu polaritu (+ a –).
- Nekombinujte staré a nové batérie ani rôzne značky alebo typy batérií (alkalické, zinkovo-uhlíkové alebo nabíjateľné).
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte a zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Kryt priestoru pre batérie musí byť vždy bezpečne uzavretý. Ak sa nedá správne uzavrieť, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uložte ich mimo dosahu detí.

Typ batérie: LR41

Napätie batérie: 1,5 V



Bezpečnostné opatrenia

1. Meracie hrot nevarte. Prístroj čistite suchou handričkou a hrot dezinfikujte alkoholom.
2. Teplomer neupustite a nevystavujte ho silným nárazom. Nie je odolný voči nárazom.
3. Merací hrot neohýbajte ani nehryzte.
4. Prístroj neskladujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, vo vlhkom ani zaprášenom prostredí. Mohlo by to spôsobiť zhoršenie jeho funkčnosti.
5. Ak teplomer funguje nepravidelne alebo displej nefunguje správne, prestaňte ho používať.
6. Uchovávajte mimo dosahu detí.
7. Pred uložením vždy očistite merací hrot.
8. Prístroj nerozoberajte, s výnimkou výmeny batérie.
9. Ak bol teplomer skladovaný pri teplotách pod bodom mrazu, pred použitím ho nechajte prirodzene zohriať na izbovú teplotu.
10. Prístroj nemusí fungovať správne, ak sa používa alebo skladuje mimo predpísaných rozsahov teploty a vlhkosti alebo ak je telesná teplota pacienta nižšia ako teplota okolia.

Technické špecifikácie

Názov a model: Minicäre – B0230

Rozsah merania:

32,0 °C až 42,9 °C (89,6 °F až 109,2 °F)

Pod 32,0 °C: zobrazuje Lo

Nad 42,9 °C: zobrazuje Hi

Rozlíšenie: 0,1 °C

Presnosť merania

Teplotný rozsah Presnosť

≤ 35,2 °C ±0,3 °C

35,3–36,9 °C ±0,2 °C

37,0–39,0 °C ±0,1 °C

39,1–41,0 °C ±0,2 °C

≥ 41,1 °C ±0,3 °C

Ďalšie technické údaje

Displej: LCD, 3½

Batéria: LR41 (súčasť balenia)

Spotreba energie: 0,40 mW počas merania

Životnosť batérie: viac ako 160 hodín nepretržitej prevádzky

Zvuková signalizácia: približne 10 sekúnd po dosiahnutí maximálnej nameranej teploty

Pamäť: ukladá poslednú nameranú hodnotu

Prevádzkové podmienky

- Teplota: 5–50 °C
- Relatívna vlhkosť: ≤ 85 %
- Atmosférický tlak: 70–106 kPa

Skladovacie podmienky

- Teplota: –20 až 55 °C
- Relatívna vlhkosť: ≤ 85 %
- Atmosférický tlak: 70–106 kPa

Systém kvality: certifikácia podľa ISO 13485

Spĺňa normy:

- ASTM E1112
- EN 12470-3
- EN 60601-1

Klasifikácia výrobku: zariadenie typu BF

Ručná odsávačka z nosa

Obsah balenia

- 1 nosný nástavec
- 1 dvojkomorová nádobka
- 1 odsávací hadička s náustkom

Pred prvým použitím

- Všetky časti umyte teplou vodou s čistiacim prostriedkom.
- Dôkladne opláchnite a nechajte uschnúť na vzduchu.
- Skontrolujte, či sú všetky časti správne zmontované a čisté.

Návod na použitie

1. Dieťa položte do mierne zaklonenej polohy s hlavou otočenou na jednu stranu. Pre lepší účinok nakvapkajte do každej nosnej dierky niekoľko kvapiek fyziologického roztoku.
2. jemne vložte nosný nástavec do jednej nosnej dierky. Nikdy ho nevkladajte príliš hlboko ani nepoužívajte silu.
3. jemne odsávajte ústami cez náustok. Dvojkomorový systém zabraňuje vniknutiu hlienu do hadičky alebo do úst.
4. V prípade potreby postup zopakujte pri druhej nosnej dierke.

Čistenie po použití

- Rozložte všetky časti.
- Umyte ich teplou vodou s čistiacim prostriedkom.
- Dôkladne opláchnite.
- Nechajte všetky časti úplne vyschnúť na vzduchu.
- Výrobok je plne opakovane použiteľný a nevyžaduje výmenu filtrov.

Upozornenie

- Tento výrobok nie je hračka. Ak ho nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Používajte iba pod dohľadom dospelého osoby. Nedovoľte dieťaťu manipulovať s odsávačkou ani ju používať.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je prasknutý, natrhnutý alebo inak poškodený. Ak zistíte poškodenie, výrobok ďalej nepoužívajte.
- Z hygienických dôvodov nepoužívajte jednu odsávačku pre viac detí bez dôkladnej sterilizácie všetkých častí medzi jednotlivými použitiami.
- Nosný nástavec zasúvajte len do hĺbky potrebnej na vytvorenie tesnenia. Príliš hlboké zasunutie môže spôsobiť poranenie nosnej sliznice.
- Odsávanie vykonávajte jemne. Nadmerná sila môže podráždiť alebo poškodiť nosné tkanivá.
- Po každom použití všetky časti dôkladne umyte a sterilizujte, aby nedošlo k bakteriálnej alebo vírusovej kontaminácii.
- Nepoužívajte v prípade poranenia nosa alebo krvácania z nosa. V takom prípade sa pred použitím poraďte s lekárom.
- Ak sa dieťa silno bráni, prestaňte odsávačku používať. Násilné použitie môže spôsobiť poranenie. V prípade potreby sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka.

Cumlík na podávanie liekov

Návod na použitie

1. Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti teplou vodou s čistiacim prostriedkom alebo ich sterilizujte.
2. Naplňte zásobník predpísanou dávkou lieku pomocou striekačky alebo priamym naliatím.
3. Ak výrobok pred použitím prenášate, uzavrite ochranné viečko.
4. Posadte dieťa do pohodlnej polosediacej polohy.
5. Ponúknite dieťaťu cumlík. Dieťa začne prirodzene sať, čo umožní jemné a postupné podávanie lieku.

Čistenie

- Po každom použití umyte teplou vodou s čistiacim prostriedkom.
- Dôkladne opláchnite.
- Možno sterilizovať vo vriacej vode alebo v parnom sterilizátore.
- Nepoužívajte umývačku riadu, pokiaľ to výrobca výslovne neuvádza.

Upozornenie

- Používajte iba pod dohľadom dospeléj osoby. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru pri používaní výrobku.
- Tento výrobok nie je hračka. Nedovoľte dieťaťu, aby sa s ním hralo alebo ho hryzalo mimo doby používania.
- Výrobok je určený výlučne na podávanie tekutín, ako sú lieky, materské mlieko alebo detská výživa. Nepoužívajte ho na horúce ani sytené nápoje.
- Pred každým použitím skontrolujte cumlík aj zásobník. Ak sú opotrebované alebo poškodené, výrobok ďalej nepoužívajte.
- Po každom použití dôkladne vyčistite všetky časti podľa pokynov výrobcu, aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov alebo množeniu baktérií.
- Nepoužívajte ho ako bežný cumlík. Je určený iba na krátkodobé použitie pri podávaní liekov alebo kŕmení.
- Tekutinu nezahrievajte v mikrovlnnej rúre priamo v cumlíku. V prípade potreby ju najskôr zahrejte samostatne a až potom naplňte zásobník.
- Zásobník nepreplňujte. Neprekračujte odporúčanú kapacitu, aby nedošlo k zaduseniu alebo rozliatiu tekutiny.
- Používajte cumlík zodpovedajúci veku dieťaťa a jeho schopnosti sať.
- Ak dieťa cumlík odmieta, dusí sa alebo vykazuje známky nepohodlia či dusenia, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa s pediatrom.
- Ak výrobok nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu dieťaťa.

Elektrická brúska na nechty

Návod na použitie

1. Uistite sa, že je brúska správne zostavená a je na nej nasadený vhodný brúsny kotúč.
2. Jemne pridržite ruku alebo nohu dieťaťa a zapnite prístroj.
3. Brúsny kotúč jemne priložte k nechtu. Nechajte prístroj pracovať – netlačte naň.
4. Podľa tvrdosti nechtov a pohodlia dieťaťa zvolte nízku alebo vysokú rýchlosť. Pilník sa môže otáčať v smere aj proti smeru hodinových ručičiek – zvolte smer, ktorý je pre vás najpohodlnejší.

Brúsne kotúče

- **Mäkký ružový kotúč** – novorodenci (0–3 mesiace)
- **Jemný žltý kotúč** – dojčatá (4–11 mesiacov)
- **Stredný modrý kotúč** – deti od 12 mesiacov
- **Hrubý kovový kotúč** – dospelí
- **Biely leštiaci kotúč** – pre všetky vekové kategórie, slúži na vyhladenie okrajov nechtov po brúsení
- **Kovový nástavec** – iba pre dospelých, na ztenčenie veľmi tvrdých nechtov a zatlačenie kožtičky (nikdy nepoužívajte priamo na pokožku)

Poznámka: Kovové nástavce nepoužívajte u dojčiat ani detí, pretože sú pre ich jemné nechty príliš abrazívne.

1. Po dokončení práce pilník vypnite a odložte na bezpečné miesto.

Batérie

Prístroj je napájaný **2 batériami AA**.

Vloženie alebo výmena batérií

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane prístroja.
2. Vložte dve batérie AA so správnou polaritou (+/-).
3. Pred použitím kryt bezpečne uzavrite.

Upozornenie týkajúce sa batérií

- Nekombinujte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií (alkalické, dobíjateľné atď.).
- Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ich prehltnutie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- Nesnažte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie.

Čistenie

- Po použití odmontujte brúsny kotúč a utrite ho mäkkou handričkou.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Uchovávajte ho na suchom a bezprašnom mieste.

Upozornenie

- Prístroj smie používať iba dospelá osoba. Nikdy nedovoľte deťom, aby s ním manipulovali alebo sa s ním hrali.
- Pred použitím si vždy prečítajte návod a dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Pred každým použitím skontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo nevykazuje známky poruchy.
- Ak je prístroj dobíjateľný, nepoužívajte ho počas nabíjania.
- Prístroj používajte iba na nechty na rukách a nohách. Nepoužívajte ho na pokožku, kožtičku okolo nechtov ani na iné časti tela.
- Vždy používajte brúsny kotúč zodpovedajúci veku dieťaťa a typu nechtov.
- Ruku alebo nohu dieťaťa pevne pridržiujte, aby nedošlo k sklznutiu alebo poraneniu.
- Prístroj je elektrický. Neponárajte ho do vody ani ho nevystavujte vlhkosti.
- Chráňte ho pred kontaktom s dlhými vlasmi, odevom alebo textíliami, aby sa do neho nezachytili.
- Ak brúsku nepoužívate, vypnite ju a uložte mimo dosahu detí.
- Ak je dieťa nepokojné alebo sa cíti nepríjemne, okamžite prestaňte pilník používať.
- Tento prístroj je určený predovšetkým na jemné nechty dojčiat a malých detí. Nepoužívajte ho na dospelých.

Vyhlasenie FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity poskytujú primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch.

Zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané podľa pokynov výrobcu, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde.

Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho signálu, čo je možné overiť jeho vypnutím a opätovným zapnutím, odporúča sa pokúsiť sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény,
- zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom,
- pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač,
- obráťte sa na predajcu alebo skúseného servisného technika pre rozhlasové a televízne zariadenia.