


GIO perfect

EMS Lifting Device

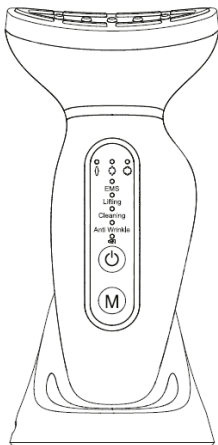

Aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku nesprávneho používania, pozorne si prečítajte pokyny a tento výrobok používajte výlučne v súlade s návodom.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk

POPIS VÝROBKU

LED

terapeutické
svetlo
(červené /
modré /
zelené)

Masážne
hlavice

Ukazovateľ
intenzity

EMS

Lifting


Čistenie

Proti vráskam

Tlačidlo
zapnutia /
nastavenia

Tlačidlo
režimu

Napájací
port USB-C

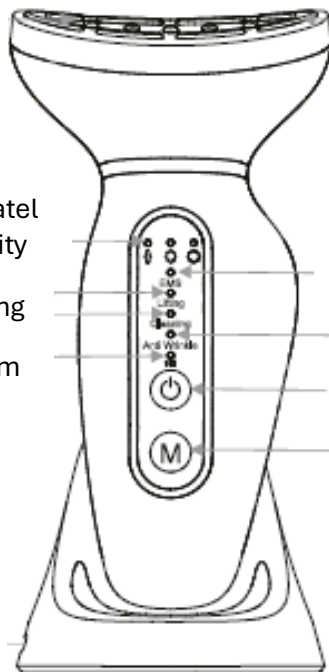

Popis jednotlivých režimov

1. EMS – červené svetlo

Stimulácia EMS pomáha spevňovať pokožku, zmierňovať viditeľnosť vrások a stimulovať mimické svaly.

2. Lifting – EMS + teplý obklad, červené svetlo

Teplá masáž v kombinácii so stimuláciou EMS podporuje krvný obeh a zlepšuje pružnosť pokožky.

3. Čistenie – vibrácie + EMS, modré svetlo

Pomáha čistiť a osviežiť pokožku, odstraňovať nečistoty z pórov a stimulovať kožné bunky.

4. Proti vráskam – vibrácie, zelené svetlo

Pomáha uvoľňovať svaly tváre a krku, zlepšovať krvný obeh a vyhladzovať jemné vrásky.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRÍSTROJA

Stlačením tlačidla napájania na 2 sekundy prístroj zapnete alebo vypnete.

Po zapnutí sa prístroj automaticky spustí v režime EMS s červeným svetlom.

Zmena režimu

Stlačením tlačidla režimu prepínate medzi dostupnými režimami.

Nastavenie intenzity

Krátkym stlačením tlačidla napájania nastavíte intenzitu vibrácií.

K dispozícii sú tri úrovne intenzity:

- nízka
- stredná
- vysoká

Automatické vypnutie

Prístroj sa po 15 minútach používania automaticky vypne.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím prístroj úplne nabite.

Ak je batéria takmer vybitá, červená kontrolka bliká.

Počas nabíjania kontrolka svieti.

Po úplnom nabití kontrolka svieti zeleno.

Po úplnom nabití odpojte nabíjačku.

Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíval, pred opätovným použitím ho nabite.

AKO POUŽÍVAŤ PRÍSTROJ

1. Zapnite prístroj a vyberte požadovaný režim.
2. Naneste na tvár alebo krk vhodný kozmetický prípravok, napríklad sérum, krém alebo gél.
3. Jemne priložte masážnu hlavicu na pokožku.
4. Pohybujte prístrojom zdola nahor a sledujte prirodzené kontúry tváre alebo krku.
5. V prípade potreby upravte intenzitu.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prístroj nie je vodotesný. Nepoužívajte ho pri umývaní ani pri sprchovaní.
2. Po použití prístroj utrite mäkkou handričkou. Neoplachujte ho vodou.
3. Pri používaní prístroja ho držte tak, aby sa vaša ruka dotýkala kovového vodivého / indukčného prúžku.
4. Prístroj nepoužívajte, ak máte kardiostimulátor.
5. Prístroj nepoužívajte počas tehotenstva ani menštruácie.
6. Na čistenie prístroja nepoužívajte alkohol ani korozívne čistiace prostriedky.
7. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
8. Prístroj skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov výrobku: GLOperfect EMS Lifting Device

Model: GIO-735

Rozmery výrobku: 132 × 70 × 28 mm

Nabíjacie napätie: 5 V / 1 A

Menovitý výkon: 3 W

Prevádzkové napätie: 3,7 V

