


GIO-357I

SK

innoGIO

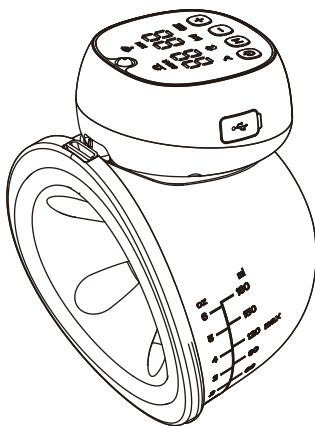

GIOmum Line Comfort
Wearable electric breast pump

INSTRUCTION MANUAL

Gratulujeme k materstvu! Ak je to vaša prvá skúsenosť s odsávačkou mlieka, môže vám chvíľu trvať, kým si na proces odsávania zvyknete.

Je dôležité, aby ste počas tohto procesu zostali uvoľnená, aj keď sa vám zo začiatku nebude dariť odsávať toľko mlieka, koľko by ste chceli. Vaše telo sa prispôsobí a po niekoľkých pokusoch budete môcť odsávať viac mlieka.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE


- Používanie obmedzte na maximálne 15 minút. Je úplne normálne, že sa počas tohto obdobia spočiatku netvorí veľa mlieka. Ak ho budete používať pravidelne, vaše telo sa nakoniec prispôsobí a bude produkovať viac mlieka.
- Výskum ukázal, že na dosiahnutie optimálnej tvorby materského mlieka by ste mali byť úplne uvoľnená. To vám pomôže uvoľniť oxytocín, hormón, ktorý stimuluje reflex vypudzovania mlieka. Preto sa pohodlne usadte na obľúbenom gauči a počúvajte pritom svoje obľúbené melódie, vyskúšajte dychové cvičenia alebo požiadajte partnera, aby vás masíroval!
- Prístroj je vybavený masážnou funkciou, ktorú môžete použiť (1-3 minúty) pred odsávaním. To pomôže vášmu telu uvoľniť oxytocín a zvýšiť tvorbu mlieka.
- Zariadenie pravidelne čistite. Vyčistite všetky časti odsávačky, ktoré prišli do kontaktu s materským mliekom, a umyte si ruky pred a po každom použití.
- Zvoľte správnu optimálnu úroveň odsávania. Postupne zvyšujte odsávanie odsávačky, až kým sa nestane mierne nepríjemným, a potom ho znížte o jeden stupeň. Po opätovnom spustení odsávačky začne pracovať na poslednej použitej úrovni odsávania.
- Keďže ide o nositeľnú odsávačku mlieka, uistite sa, že používate vhodnú dojčiacu podprsenku.

POPIS PRODUKTU


Kábel typu C - 1 ks



Nastavitelná spona k podprsenke - 1ks

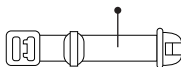


Odsávací motor - 1ks

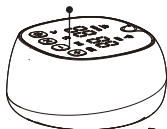



Masážny prsní košík 24 mm - 1ks

Masážny prsní košík 27 mm - 1ks

Silikónová membrána - 2ks

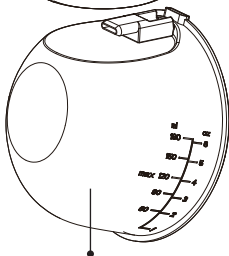

Zberač mlieka - 1ks

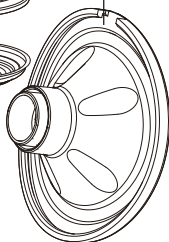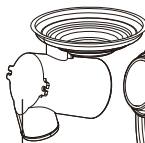

Ventil - 2ks

Hlavice - 1ks

Zahrnuté doplnky

Vložka 21 mm - 1ks

Vložka 19 mm - 1ks


Vložka 17 mm - 1ks

Utesňovací krúžok - 2ks

Dolgový ovládač - 1ks

Ukladací taška - 1ks

KONTROLNÍ PANEL

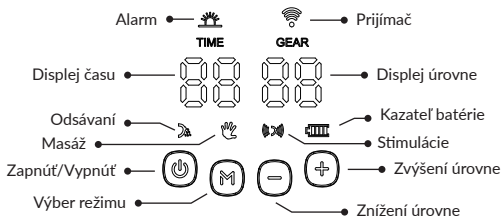

Pred odsávaním použite masážny režim.

3 REŽIMY

Masážna funkcia: 12 úrovní

(Použite najprv na stimuláciu tvorby mlieka.)

Funkcia odsávania: 12 úrovní

(Vyberte si optimálnu úroveň, režim odsávania je určený na pomalé aj hlboké odsávanie).

Stimulácia: 6 úrovní

(Masážna a sacia funkcia sa zapínajú súčasne. Užitočné pre vpáčené bradavky alebo pre matky, ktoré sa prvýkrát prisávajú. Režim 3+1 pracuje s frekvenciou 3 krátkych masáží a 1 hlbokého odsávania)

Zapnuté/vypnuté: Dlhé stlačenie tlačidla

Zmena režimu: Stlačte tlačidlo

Zmena úrovne: Stlačte tlačidlo a zvýšiť alebo znížiť intenzitu.

Indikátor batérie a nabíjanie

Blikajúce biele svetlo: slabá batéria (je potrebné ju nabiť)

Biele svetlo: batéria je plne nabitá (pri nabíjaní bliká bielo)

Mliečne upozornenie: Alarm bliká červeno každých 10 minút, keď je čas vybrať zberač mlieka. Odsávačka mlieka sa automaticky vypne po 30 minútach.

POKYNY NA ČISTENIE


Pred použitím

1. Odstráňte sací motor
2. Silikónové časti varte vo vriacej vode 3 až 5 minút.
3. Zberač mlieka a hlavicu umyte mydlovou vodou a dôkladne opláchnite.
4. Diely buď utrite do sucha, alebo ich nechajte vyschnúť na vzduchu.

Po použití


1. Okamžite po použití opláchnite zberač mlieka, ventil a hlavicu.
2. Silikónové časti varte vo vriacej vode 3 až 5 minút.
3. Pred čistením diely buď osušte, alebo ich nechajte vyschnúť na vzduchu.
4. Elektrickú časť odsávača neponárajte do vody.

ZOSTAVENÍ ODSÁVAČKY

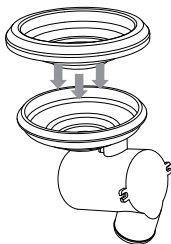


KROK 1

Vložte silikónovú membránu do hlavy čerpadla a zatlačte ju nadol, aby ste zabezpečili tesné uloženie a dokonalé utesnenie.

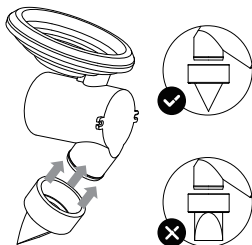

KROK 2

Ventil nainštalujte do spodnej časti hlavy. Uistite sa, že je nastavený správnym smerom.

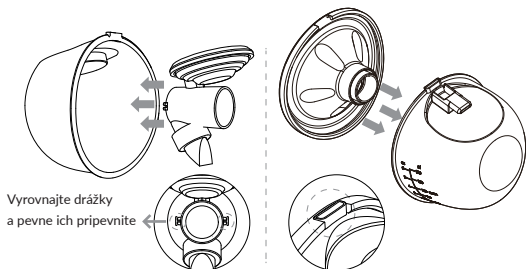


KROK 3

Zostavenú hlavu vložte do
zberača mlieka.

KROK 4

Nasadte odsávačku mlieka na
zberač mlieka a uistite sa, že je
riadne utesnená, aby sa zabránilo
úniku mlieka.

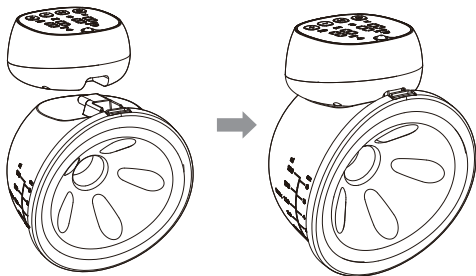

KROK 5

Nainštalujte odsávací motor.


NÁVOD NA POUŽITIE

Vloženie odsávačky mlieka do podprsenky



Prsník pevne pritlačte k prsníku a uistite sa, že bradavka je uprostred. Kôš držte vo vzpriamenej polohe. Dávajte pozor, aby ste nezmenili polohu odsávačky alebo prsníka - odsávačka by nemusela správne fungovať.

Vypnite odsávačku mlieka a opatrne ju vyberte

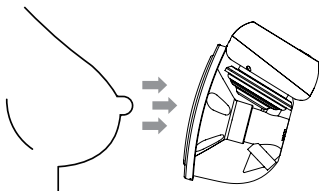


Poznámka: Pri používaní odsávačky mlieka neležte. Ak pri odsávaní pociťujete nepohodlie alebo si všimnete pluzgiere/odreniny na bradavke, skúste znížiť úroveň

ODSÁVANIE V SEDE



Uvoľnite telo, sadnite si na pohodlnú stoličku a mierne sa predkloňte (na podopretie chrbta použite vankúš).

Uistite sa, že odsávačka mlieka je vo vzpriamenej polohe.

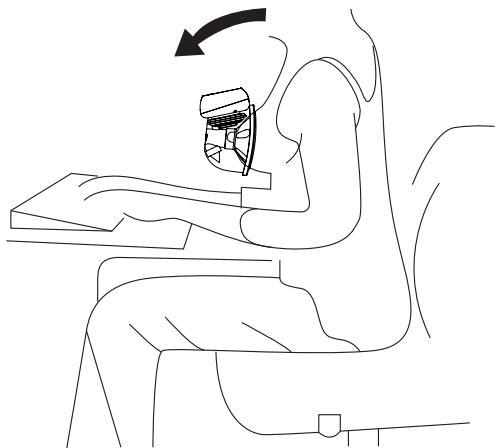

VYLIATIE MLIEKA

Odsávačku mlieka nechajte vo zvislej polohe a opatrne vyberte kefku. Pri prečerpávaní mlieka do fľaše si všimnite otvor na okraji zberače.

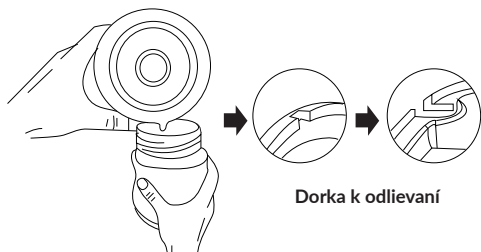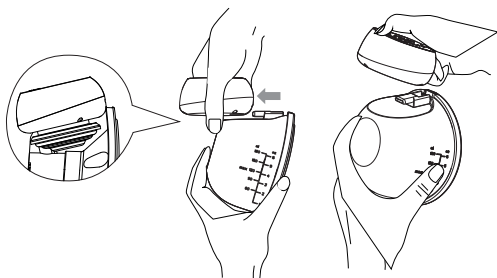


Dorka k odlievání

POKYNY NA POUŽÍVANIE NASTAVITEĽNEJ SPONY

Nastavte dĺžku ramienok podprsenky, aby bolo čerpanie pohodlnejšie.

Jeden koniec spony zahúknite na vnútornú stranu dojčiacej podprsenky. Dĺžku ramienka môžete upraviť pripevnením druhého konca spony na koniec ramienka.

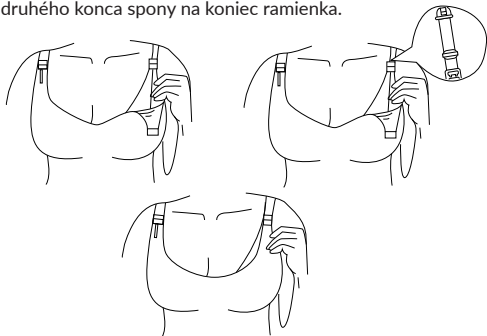

Riešenie problémov

Slabé či žiadne odsávanie	1.Skontrolujte, či je ventil správne nainštalovaný. 2.Pred použitím nabite odsávač. 3.Skontrolujte, či je jednotka správne zatlačená, inak nebudete mať odsávanie.
Bolestivé bradavky	1.Najprv masírujte a potom zvolte pohodlnú úroveň odsávania. 2.Poradte sa s laktáčnou alebo dojčiacou poradkyňou.
Žiadne/ malé množstvo	1.Uistite sa, že ste v pohodlnej polohe. 2.Ak ste odsávali 5-10 minút, odpočinite si a skúste to o niekoľko minút znova. 3.Nastavte optimálnu úroveň odsávania. 4.Uvoľnite sa a skúste to znova.

NÁVOD NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Uistite sa, že je odsávačka mlieka správne umiestnená v dojčiacej podprsenke a je dobre pripevnená k prsníku. Ak chcete odsávačku zapnúť na diaľku, nasmerujte diaľkový ovládač na odsávačku mlieka a stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači. Na zmenu úrovne a režimu použite tlačidlá s príslušnými ikonami. Po použití stlačte tlačidlo ON/OFF a vyberte odsávačku mlieka.

POZNÁMKY: ODSÁVAČKA MLIEKA SA MÔŽE POUŽÍVAŤ LEN V PRÍPADE, ŽE JE TO POTREBNÉ:

Diaľkový ovládač je doplnkové ovládacie zariadenie. Ak sa poškodí alebo stratí, odsávačku možno naďalej ovládať



Ďakujeme, že ste si vybrali produkty InnoGIO!

Aby ste výrobok dobre používali, pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre prípad, že by ste v budúcnosti mali akékoľvek otázky.

Obrázky použité v návode na použitie slúžia len ako referencia.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi obrázkami a výrobkom sa radšej držte skutočného výrobku.

innoGIO

Vyrobené v Číne pre INNOGIO sp
Ulica Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o.
Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, ČR, www.andys.sk



@innoGIO.official



@innogio_com

CE RoHS

