


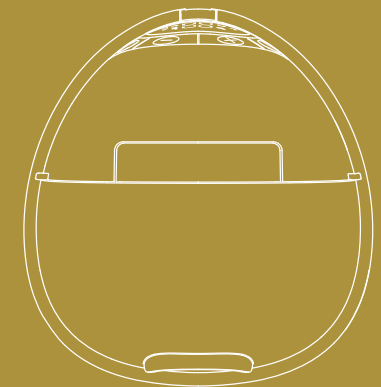

GIOmum Line Discreet

Dvojitá nositeľná elektrická
odsávačka mlieka

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím nositeľnej odsávačky mlieka si prečítajte tento návod na použitie a uschovte ho na budúce použitie.


Po prvé, odsávačka mlieka môže simulovať sací pohyb dojčťa, pomáhať pri prisatí k prsníku, podporovať vylučovanie prolaktínu hypofýzou a stimulovať vylučovanie mlieka z prsníka, čím zvyšuje produkciu mlieka, čo môže pomôcť uspokojiť potreby vášho dojčťa.

Po druhé, odsávačka mlieka môže podporovať kontrakciu prsného epitelu, čím podporuje vylučovanie mlieka z prsných kanálikov, zabezpečuje vyprázdnenie prsníka a zmierňuje napätie prsníkov. Okrem toho pravidelné používanie odsávačky mlieka môže podporovať odsávanie prebytočného mlieka z prsných kanálikov, čo môže pomôcť predchádzať akútnej mastitíde.

Po tretie, používanie odsávačky mlieka môže zlepšiť frekvenciu priameho dojčenia a zvýšiť sebavedomie matiek pri dojčení, čo je prospešné pre matky aj dojčťa.


Po štvrté, toto zariadenie je vhodné na osobné použitie doma a neodporúča sa používať ako pomocný prostriedok v zdravotníckych zariadeniach.

Upozornenie: Ak je sací výkon znížený, pravdepodobne je potrebné vymeniť ventil alebo membránu. Silikónové diely sú opotrebovateľné a pri opotrebovaní je potrebné ich vymeniť.

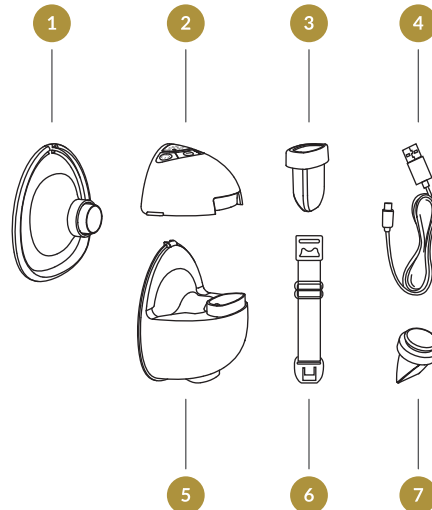

Zoznam dielov:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1 Príruba | 4 USB nabíjací kábel |
| 2 Motor čerpadla | 5 Zberač mlieka |
| 3 Silikónová membrána | 6 Spona na nastavenie podprsenky |
| | 7 Ventil |

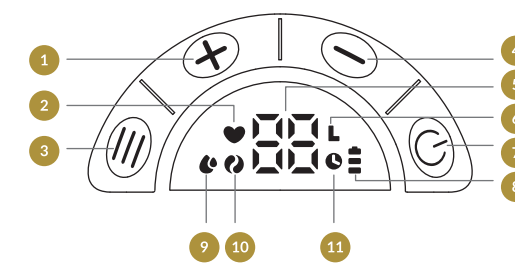

- | | |
|--|--|
| 1 Tlačidlo zvýšenia úrovne | 7 Tlačítko pro zapnutí/
přepnutí režimu |
| 2 Režim stimulácie | 8 Displej napájania |
| 3 Tlačidlo pauza/štart | 9 Režim odsávanie |
| 4 Tlačidlo zníženia úrovne | 10 Režim masáže |
| 5 Zobrazení úrovně/
zobrazení času (minuty) | 11 Ikona hodín |
| 6 Symbol úrovne | |


Pri montáži čerpadla postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- UPOZORNENIE!**
- Odsávačku čistite podľa pokynov v tejto používateľskej príručke.
 - Odsávačku zmontujte správne podľa pokynov v tejto používateľskej príručke.
 - Aby nedošlo k úniku, pred montážou odstráňte zvyšky z okraja.
 - Pred montážou čistých komponentov si dôkladne umyte ruky.

- Namontujte ventil na zberač mlieka, dbajte na uhol, v ktorom je namontovaný.




- Vložte silikónovú membránu do zberača mlieka a pritlačte ju rukami, aby sa okraje pevne upevnili a zabezpečili dokonalé utesnenie.

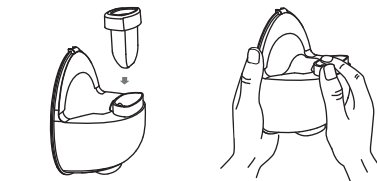


- Pri montáži príruby na zberač mlieka sa uistite, že odklápacia drážka na príрубе je zarovnaná s drážkou spätného toku na zberači mlieka, a potom okraje pritlačte oboma rukami, aby tesnenie bolo na svojom mieste.



- Namontujte hlavnú časť odsávačky mlieka na zberač mlieka, zarovnajte zárez pod hlavnou časťou so silikónovou membránou a namontujte ju smerom nadol, aby sa zberač mlieka prispôbil a zabezpečilo sa úplné tesnenie.

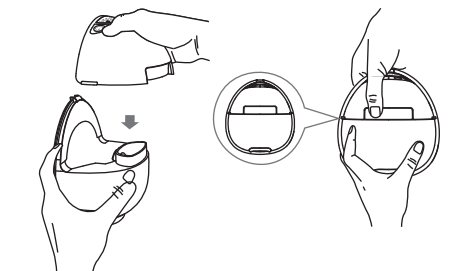


- Priložte odsávačku pevne k prsníku. Zabezpečte, aby nevznikli žiadne medzery a uistite sa, že bradavky sú v strede. Držte ho vo zvislej polohe. Dávajte pozor, aby ste nezmenili polohu zariadenia a prsníka, inak odsávačka nebude odsávať.

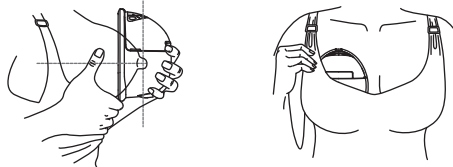


- Dlho stlačte tlačidlo napájania, aby sa odsávačka spustila, až kým sa rozsvieti displej.




- Stlačením tlačidla môžete spustiť alebo pozastaviť prevádzku odsávačky. Po spustení odsávačky krátko stlačte tlačidlo , aby ste prepikli režim. Pomocou tohto tlačidla môžete prepínať medzi tromi rôznymi režimami (režim odsávania, režim stimulácie a režim masáže). Keď svieti , znamená to, že zariadenie je v režime vyjadrovania; Keď svieti , znamená to, že je zapnutý stimulačný režim; Keď svieti , znamená to, že je zapnutý masážny režim.

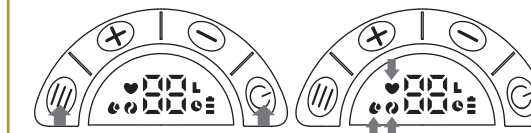

- V každom režime je k dispozícii 9 úrovní. Úroveň sania, ktorá vám vyhovuje, môžete vybrať krátkym stlačením tlačidla „+“ pre zvýšenie úrovne a tlačidla „-“ pre zníženie úrovne.

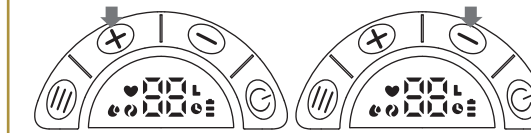

5. Keď je odsávačka mlieka zapnutá, stlačením tlačidla sa na displeji zobrazí úroveň aktuálneho režimu. Súčasne sa rozsvieti symbol úrovne  na displeji. Ak tlačidlo nestlačíte do 2 sekúnd, zobrazenie úrovne na displeji sa prepne na zobrazenie času a súčasne sa rozsvieti ikona hodín  na displeji.

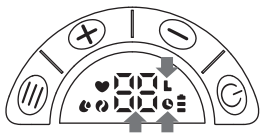

6. Dlhé stlačenie tlačidla napájania  vypne odsávačku mlieka.




Tipy:

1. Tento model má vstavanú pamäťovú funkciu, takže po zapnutí zariadenia sa automaticky aktivuje naposledy použitý režim stimulácie a úroveň odsávania.
2. Ak je prevádzka zariadenia pozastavená a do 5 minút nie je stlačené žiadne tlačidlo, odsávačka mlieka sa automaticky vypne.
3. Odsávačka mlieka sa automaticky vypne po 20 minútach prevádzky.


LED indikátor stavu batérie

09


1. Na odsávačke mlieka sú zobrazené tri úrovne výkonu.

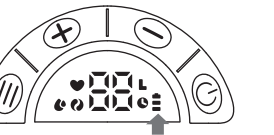


2. Ak je počas používania indikátor výkonu na úrovni 1 a blinká, znamená to, že batéria je takmer vybitá. Nezabudnite ju včas nabiť.

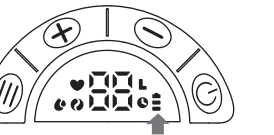

3. Zariadenie nie je možné používať počas nabíjania, v tomto prípade sa na displeji zobrazuje len aktuálna úroveň nabitia. Keď je stav batérie 3 čiarocky a neblinká, znamená to, že batéria je úplne nabitá.

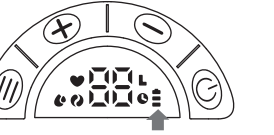


4. Po každom použití stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte indikátor batérie. Ak displej signalizuje nízky stav batérie, nabite ju pomocou nabíjačky DC5V $\equiv$ 1A.

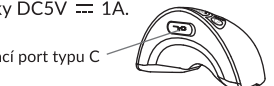

Pokyny pre polohu pri dojení

10

Uvoľnite sa a posadte sa do pohodlnej stoličky, potom sa mierne nakloňte dopredu (na oporu chrbta použite vankúš). Uistite sa, že vaše telo a odsávačka sú v jednej osi.

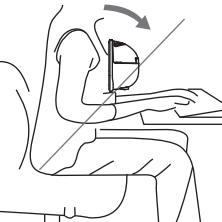

Poloha pri dojení

Pokyny týkajúce sa spony na nastavenie podprsenky

Nastavte dĺžku ramienok podprsenky tak, aby bolo prisatie pohodlnejšie. Jeden koniec spony na nastavenie podprsenky zavesíte na vnútornú sponu dojčiacej podprsenky. Dĺžku spony podprsenky môžete nastaviť zavesením spony dojčiacej podprsenky na druhý koniec spony na nastavenie podprsenky.



Obrázok 1

Obrázok 2


Obrázok 3

Koniec odsávania


11

Po ukončení odsávania odstráňte odsávačku z prsníka. Odsávačku držte vo zvislej polohe a odstráňte motorovú časť. Držte zbernú nádobku tak, aby sa mlieko vylialo do fľaše. Uistite sa, že otvor zbernej nádoby je zarovnaný s otvorom fľaše, aby sa mlieko nevylialo.


1. Po dokončení odsávania stlačte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie vypli, prstom prerušte tesnenie medzi prsníkom a lievikom odsávačky a potom odsávačku opatrne odstráňte z prsníka.

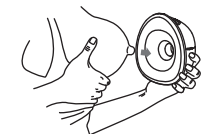

2. Oddelte zberač mlieka od motora odsávačky, aby ste ho pripravili na kŕmenie/uskladnenie. Ostatné použité časti vyčistíte podľa pokynov.

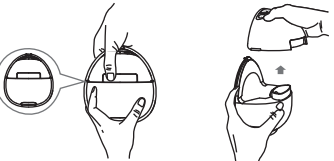

3. Nalejte mlieko do fľaše; uistite sa, že otvor je zarovnaný s ústím fľaše.

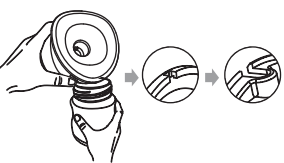

Čistenie

12

Čistenie a údržba

	Prvé použitie	Po každom použití
Těleso čerpadla	-	Podľa potreby utrite čistou, vlhkou handričkou s 70 % etylalkoholom alebo izopropylalkoholom. Prsný odsávač neponárajte do vody.
Príruba, silikónová membrána, ventil a zberač mlieka	Varte vo vode po dobu 5 minút. Nasledujúce časti nekladajte do mikrovlnnej rúry: príruba, silikónová membrána, ventil a zberač mlieka.	Čistite jemným prostriedkom na umývanie riadu alebo čistou vodou.

Čistenie

13

UPOZORNENIE!

- Pri demontáži a čistení ventilu buďte opatrní; ak je ventil poškodený, odsávačka mlieka nebude fungovať správne.
- Ventil vyčistite jemným potrením v teplej vode s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku. Do ventilu nekladajte žiadne predmety, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.

Čistenie ručne

- Časti odsávačky prsného mlieka vložte do čistej misy, ktorá sa používa výhradne na dojčenské potreby. Časti odsávačky prsného mlieka nekladajte priamo do drezu.
- Do misy pridajte čistiaci prostriedok a horúcu vodu.
- Časti očistite čistou kefkou, ktorá sa používa výhradne na dojčenské potreby.
- Časti opláchnite pod tečúcou vodou alebo ich ponorte do čistej vody v samostatnej mise.
- Dôkladne vysušte na vzduchu. Časti odsávačky, misku a kefkou na fľaše položte na čistú, nepoužitú utierku alebo papierovú utierku na miesto chránené pred nečistotami a prachom. Na utieranie alebo sušenie predmetov nepoužívajte utierku na riad.
- Vyčistite misku a kefkou na fľaše. Po každom použití ich dobre opláchnite a nechajte vyschnúť na vzduchu. Umývajte ich ručne aspoň raz za niekoľko dní.

Skladovanie materského mlieka

14

Skladovanie materského mlieka

1. Uchovávajte iba materské mlieko odsaté pomocou sterilizovaných odsávačiek.
2. Odsaté mlieko môžete uložiť do čistého a sterilizovaného vrecka na uchovávanie mlieka alebo do fľaše na mlieko s tesniacim vankúšikom a ihneď vložiť do chladničky.

Upozornenie!

1. Materské mlieko nezamrazujte viac ako raz.
2. Nemieste čerstvé materské mlieko s mrazeným materským mliekom.
3. Zvyšné materské mlieko po nakŕmení vždy vyhodte.
4. Odstriekané mlieko môžete uchovávať v chladničke 48 hodín alebo v mrazničke až tri mesiace. Fľašu alebo vrecúško na uchovávanie mlieka označte dátumom a časom.

Ako rozmraziť materské mlieko

Zmrazené materské mlieko vložte na noc do chladničky, aby rozmrzlo. Ak potrebujete zmrazené mlieko použiť urgentne, môžete ho rozmraziť v miske s teplou vodou. Po rozmrazení materské mlieko spotrebujte do 24 hodín.

Ako zohriať materské mlieko

1. Vložte fľašu na dojčenie do misy s horúcou vodou alebo dojčenské mlieko bezpečne a rýchlo zohrejte pomocou ohrievača fliaš a potravín.
2. Upozornenie! Pred kŕmením dieťaťa skontrolujte teplotu dojčenského mlieka.

3. Na zohriatie dojčenského mlieka nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani klasickú rúru, pretože by sa mohli zničiť dôležité živiny a protilátky.
4. Nerovnomerné zahrievanie môže navyše spôsobiť čiastočné prehriatie tekutiny, čo môže viesť k popáleninám.
5. Fľašu na skladovanie mlieka na zahriatie neponárajte do vriacej vody, pretože by mohla prasknúť alebo sa rozbiť.

innogio

Vyrobeno v Číne pre **InnoGIO** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko

www.innogio.com

 @innogio.official  @innogio_com

